


ชุดเรียกแบบสนทนาได้ Sub Station

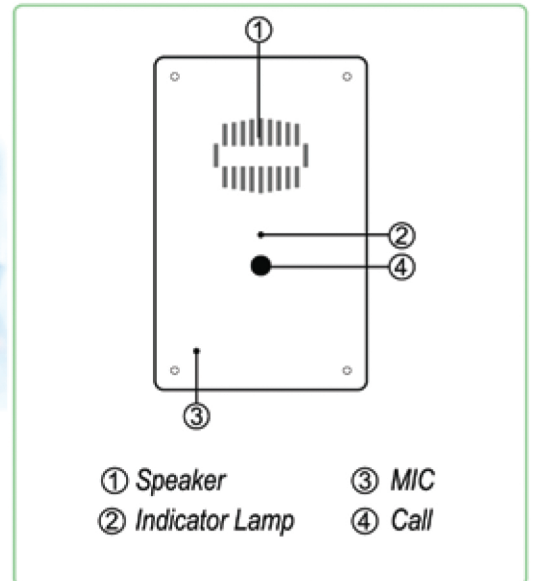

หน้าที่การทำงาน

1. Speaker : ลำโพงสำหรับฟังเสียงสนทนา
2. Indicator Lamp : LED ไขว้การทำงาน
3. MIC : ไมโครโฟนสำหรับสนทนา
4. Call : ปุ่มสำหรับกดเรียก

หลักการทำงาน

1. เมื่อมีการกดสวิทช์เรียกพยาบาลจาก Call สวิตช์หรือสายกด จะมีสัญญาณ LED และมีสัญญาณเสียงแสดงการทำงาน
2. สามารถพูดคุยกับชุดควบคุมได้โดยไม่ต้องกดปุ่มใดอีก
3. มีจุดสำหรับต่อสายกดเรียกพยาบาล
4. สามารถยกเลิกได้จากชุดควบคุม

คุณสมบัติเฉพาะ

Working voltage	18 VDC
Working environment	-35 °C~60 °C
Talking method	main body control
Dimension	220x155x60 mm.

Static current	30mA
max current	300mA
Remind method	vibrating ring

